





IoTでご利用者にさらなる安心・安全を！
電動車いす24時間モニタリングシステム

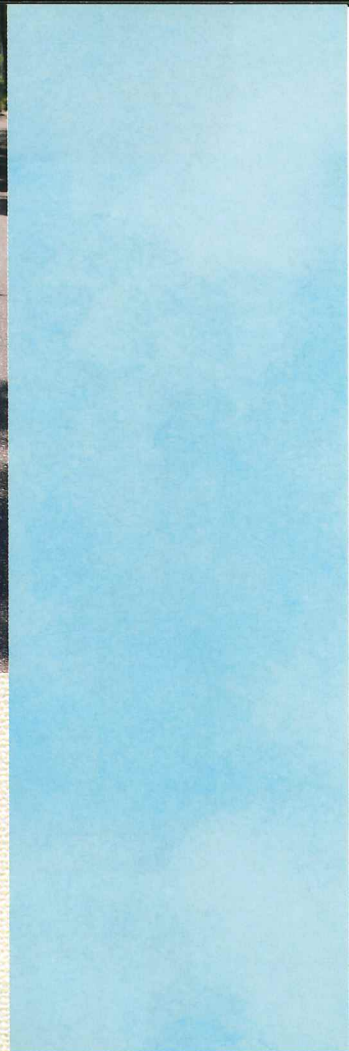

モニスタとは？

モニスタ*とは、シンエンスの電動車いす(一部機種除く)レンタルサービスに採用のIoTモニタリングシステムです。車両に搭載されたデバイスが走行中の電動車いすを常時モニタリングし、ご利用者の日々の使用状況(走行軌跡、活動エリア・走行時間や距離、衝撃データ)、現在地、消耗品の交換時期などをリアルタイムでお知らせします。福祉用具貸与事業所様、ケアマネジャー様、ご利用者のご家族などでデータを共有する事で、ご利用者に寄り添った、質の高いレンタルサービスをご提供いたします。

※monitoring snuggle up to all: すべての方に寄り添ったモニタリングサービス

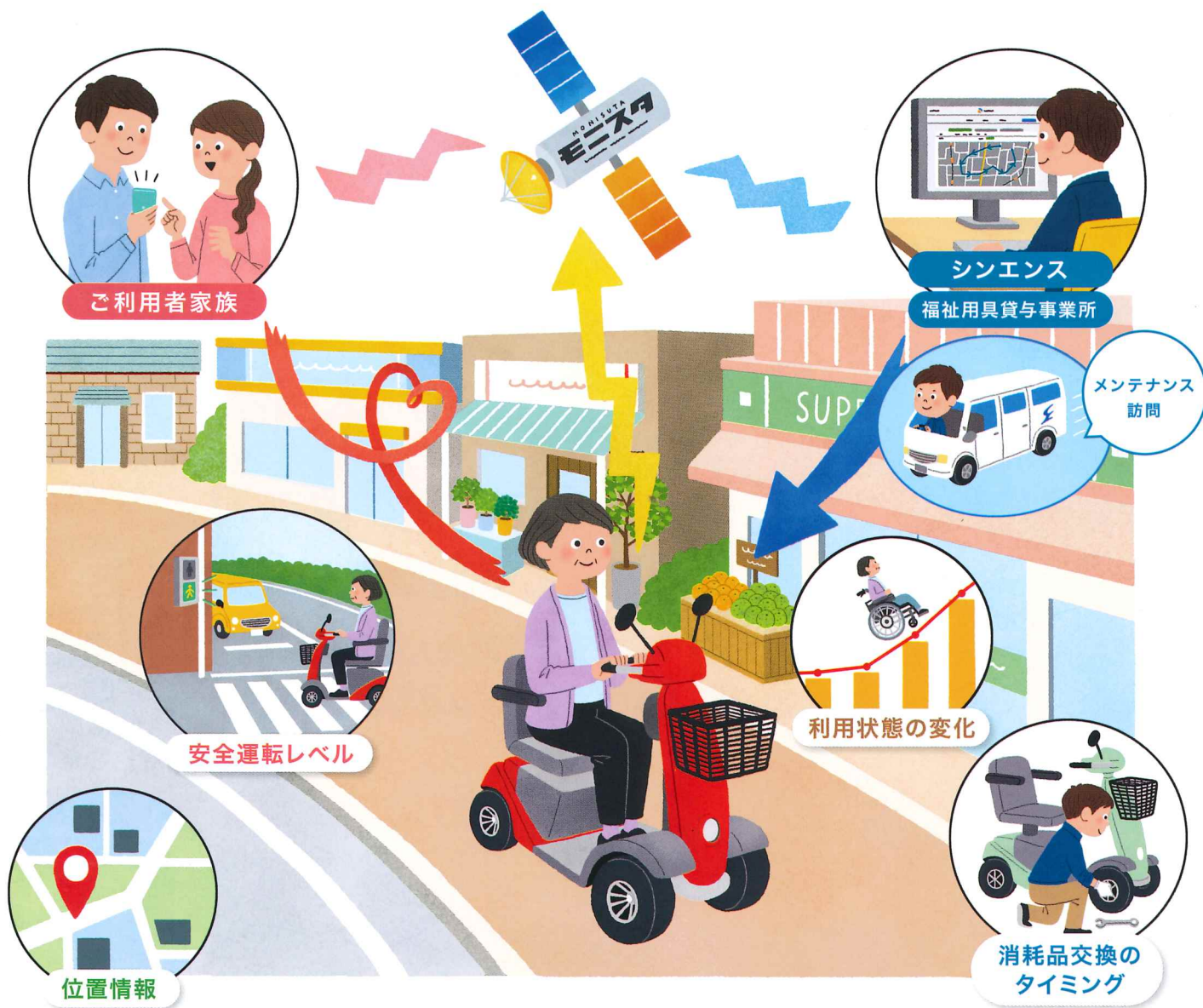

車載IoTデバイス

車両には高性能トラッカー(FB1000)を搭載しています。

GPSによる位置情報、衝撃センサーによる車両の接触や無理な段差乗り越えをデータとしてサーバーに送信(5分毎)します。

寸法: W90×D55×H18mm、重量: 65g、
内蔵バッテリー: 400mAh



モニスタにできること

01 車載GPSによるマップデータ、位置情報により安全な利用を促進



- ✓ マップから日々の活動エリアが把握できるため、踏切や交通量の多い道路、想定を超えた遠方での使用を防ぐことができます。
- ✓ 位置情報から故障やバッテリー切れの際、ご利用者の所在をいち早く見つけ出すことができます。

02 利用状況グラフによりご利用者の変化をキャッチ



- ✓ グラフ表示された過去(日・週・月・過去6か月)の走行時間・距離の推移から、ご利用者の体調の変化、疾病の進行によるADLの低下などを見つけて出すことができ、その後の支援方針にご活用いただけます。

03 衝撃センサー搭載により安全運転レベルを把握



- ✓ 接触や無理な段差乗り越えなどは衝撃データとして蓄積され、過去3か月分の衝撃回数が月次表示されます。回数の多いご利用者への再指導、運転技術の低下が著しいご利用者のレンタル継続の可否判断にご活用いただけます。

04 使用状況を個別管理する事により最適時期のメンテナンス実施



- ✓ バッテリーやタイヤなどの消耗部品の交換タイミングは、使用頻度により大きく異なります。モニスタでは、ご利用者ごとの使用状況を個別管理することで、タイミングを逃さず、車両のメンテナンスを行うことが可能です。

ご利用者・ご家族向けサービス

ご利用者の電動車いす利用状況を確認可能

ご利用者のご家族は、簡単なアカウント登録によりモニスタ管理ページをご使用可能となります。これにより、お手持ちのスマートフォン、タブレットなどでご利用者に関する以下のような情報を確認できます。


- 現在地
- 活動エリア
- 車体情報
- 走行時間・距離
- 衝撃アラート



福祉用具貸与事業所向けサービス

月次レポート活用でケアマネジャーとの連携強化

使用状況がひと目で分かる「電動車いす利用状況報告書」を月次で出力でき、ケアマネジャー様との連携をより強化していただくことが可能です。

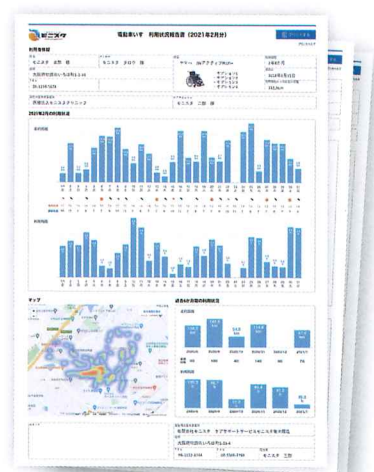



- モニスタは介護保険制度対象外のサービスです。
- 本製品は環境条件により、検知場所のズレや誤検知が発生する場合があります。
- 本製品は電動車いすの安全な利用をサポートするためのものであり、事故を直接的に防止するものではありません。
- 本製品は生命や財産にかかわるような状況下で使用されることを目的として設計、製造していないため、万一、本製品のシステム停止や誤作動で発生した人身事故、災害事故などによる損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

動画でわかる!モニスタのすべて

福祉用具貸与
事業所様は
こちら



ご利用者
ご家族様は
こちら



モニスタについてのお問い合わせは

 **株式会社 シンエンス**
SINENTH CO.,LTD.

本社 〒577-0015 大阪府東大阪市長田3-8-30
TEL 06-7664-8811 / FAX 06-7664-8812
Web <https://www.sinenth.co.jp/>

- 本カタログに記載の内容は、製品開発・改良のため予告なしに変更されることがあります。
- 写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。
- 無断の複製・転載はお断りいたします。